

# PULPDENT® Embrace™ First-Coat

## PRODUCT DESCRIPTION

Embrace First Coat is a unique one-step resin-based primer that bonds chemically and mechanically to etched ceramic and abraded metal surfaces. It is an optional enhancer in combination with Dental Cements for adhesion and sealing, particularly in challenging clinical conditions involving moisture.

## INDICATIONS

Cement enhancer for luting direct and indirect restorations.

## CONTRAINDICATIONS

Do not use on patients with known resin allergies. For any potential allergies, refer to associated MSDS.

## INSTRUCTIONS FOR USE

1. Pre-treat the restoration surfaces accordingly.
2. Apply a thin coat of Embrace First-Coat on the clean dry metal and/or ceramic surfaces with a flocked applicator tip.
3. Light cure for 20 seconds.

## WARNING:

- Embrace First-Coat may cause eye or skin irritation on contact.
- Always wear protective gloves and eyewear when using Embrace First-Coat.
- In case of eye contact with Embrace First-Coat, flush thoroughly with water at a sink or emergency eye wash station.

## STORAGE AND HANDLING

- Store tightly sealed in original container at cool room temperature. Avoid direct light, extremes of temperature, contamination and sources of ignition.

## REPORTING OF SERIOUS INCIDENTS


Any serious incidents involving the device should be reported to the manufacturer and the Competent Authority of the Member State in which the incident occurred, or other appropriate regulatory body. Reports of serious incidents should be sent to:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262 / [www.pulpdent.com](http://www.pulpdent.com) / email: [pulpdent@pulpdent.com](mailto:pulpdent@pulpdent.com)

Note: Refer to the Safety Data Sheet for a list of materials present in this product.

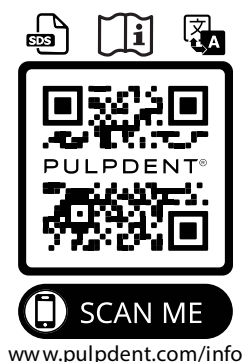

SDS	Electronic Safety Data Sheet
EN	Electronic Safety Data Sheet
ES	Ficha electrónica de datos de seguridad
FR	Fiche de données de sécurité électronique
DE	Elektronisches Sicherheitsdatenblatt
IT	Scheda di sicurezza elettronica
DK	Elektronisk sikkerhedsdatablad
NL	Elektronisch veiligheidsinformatieblad
SE	Elektroniskt säkerhetsdatablad
NO	Datablad om elektronisk sikkerhet
FI	Sähköinen käyttöturvallisuustiedote
CZ	Elektronický bezpečnostní list
LV	Elektroniskā drošības datu lapa
LT	Elektroninis saugos duomenų lapas
PT	Ficha de dados de segurança eletrónica
SK	Elektronická karta bezpečnostných údajov
PL	Elektroniczna karta charakterystyki
RO	Fișa electronică cu date de securitate
EE	Elektroniline ohutuskaart
BG	Електронен информационен лист за безопасност
GR	Ηλεκτρονικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας



**PULPDENT® - FR**  
**Embrace™ First-Coat**

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Embrace First Coat est un apprêt unique à base de résine en une seule étape qui se lie chimiquement et mécaniquement aux surfaces céramiques gravées et aux surfaces métalliques abrasées. Il s'agit d'un améliorateur facultatif en combinaison avec les ciments dentaires pour l'adhérence et le scellement, en particulier dans des conditions cliniques difficiles impliquant l'humidité.

**INDICATIONS**

Améliorateur de ciment pour le scellement des restaurations directes et indirectes.

**CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas utiliser chez les patients ayant des allergies connues à la résine. En cas d'allergies potentielles, consultez la fiche de données de sécurité (FDS).

**INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

1. Prétraiter les surfaces de restauration conformément.
2. Appliquer une fine couche d'Embrace First-Coat sur les surfaces métalliques et/ou céramiques propres et sèches à l'aide d'un embout applicateur floqué.
3. Photopolymérisation pendant 20 secondes.

**AVERTISSEMENT :**

- Embrace First-Coat peut provoquer une irritation des yeux ou de la peau en cas de contact.
- Toujours porter des gants de protection et des lunettes de sécurité lors de l'utilisation d'Embrace First-Coat.
- En cas de contact oculaire avec Embrace First-Coat, rincer abondamment à l'eau au lavabo ou à une station de lavage oculaire d'urgence.

**STOCKAGE ET MANIPULATION**

- Conserver hermétiquement clos dans le contenant original à température ambiante fraîche. Eviter la lumière directe, les températures extrêmes, la contamination et les sources d'ignition.

**NOTIFICATION DES INCIDENTS GRAVES**

Tout incident grave impliquant le dispositif doit être notifié au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'incident s'est produit, ou à tout autre organisme de réglementation approprié.

Les rapports d'incidents graves doivent être envoyés à :

Société Pulpdent  
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 États-Unis  
Tél. : 617-926-6666 / Fax : 617-926-6262

courriel : pulpdent@pulpdent.com

Remarque: Veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité pour une liste des matériaux présents dans ce produit.

**PULPDENT® - PL**  
**Embrace™ First-Coat**

**OPIS PRODUKTU**

Embrace First Coat to unikalny jednoskładnikowy primer na bazie żywicy, który wiąże się chemicznie i mechanicznie z wytrawionymi powierzchniami ceramicznymi i szorstkowanymi powierzchniami metalowymi. Jest to opcjonalny wzmacniacz stosowany w połączeniu z cementami dentystycznymi do adhezji i uszczelniania, szczególnie w przypadku trudnych warunków klinicznych związanych z wilgocią.

**WSKAZANIA**

Wzmacniacz cementu przeznaczony do cementowania bezpośrednich i pośrednich odbudów.

**PRZECIWSKAZANIA**

Nie stosować u pacjentów z alergią na żywicę. W przypadku potencjalnych alergii, zapoznaj się z odpowiednią kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).

**WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA**

1. Wstępnie przygotuj powierzchnie odbudowy zgodnie z zaleceniami.
2. Nałóż cienką warstwę Embrace First-Coat na czyste, suche powierzchnie metalowe i/lub ceramiczne za pomocą końcówki aplikatora z mikrofibry.
3. Poddawaj fotopolimeryzacji przez 20 sekund.

**OSTRZEŻENIE:**

- Embrace First-Coat może powodować podrażnienie oczu lub skóry w przypadku kontaktu z nimi.
- Zawsze noś rękawice ochronne i okulary ochronne podczas używania preparatu Embrace First-Coat.
- W przypadku kontaktu Embrace First-Coat z oczami, należy dokładnie przepłukać je wodą przy umywalce lub stacji do płukania oczu w nagłych wypadkach.

**PRZECHOWYWANIE**

- Przechowuj w szczelnie zamkniętym, oryginalnym pojemniku, w chłodnej temperaturze pokojowej. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia, ekstremalnych temperatur, skażenia materiału i źródeł zapłonu.

**ZGŁASZANIE POWAŻNYCH INCYDENTÓW**

Wszelkie poważne incydenty związane z wyrobem należy zgłaszać producentowi i kompetentnemu organowi odpowiedzialnemu, w regionie, w którym miał miejsce incydent. Raporty o poważnych zjściach wysyłaj do:

Pulpdent Corporation  
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA  
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

email: pulpdent@pulpdent.com

**Uwaga:** Lista materiałów obecnych w tym wyrobie dostępna w Karcie Charakterystyki Wyrobu.

**PULPDENT® - IT**  
**Embrace™ First-Coat**

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Embrace First Coat è un primer innovativo monocomponente a base di resina, progettato per aderire chimicamente e meccanicamente a superfici in ceramica incisa e metallo abraso. È un potenziatore opzionale da utilizzare in combinazione con cementi dentali, ideale per migliorare adesione e sigillatura, soprattutto in condizioni cliniche complesse associate all'umidità.

**INDICAZIONI**

Additivo per cementi, indicato per la sigillatura di restauri diretti e indiretti.

**CONTROINDICAZIONI**

Non utilizzare su pazienti con allergie note alla resina. Fare riferimento alla relativa MSDS per eventuali allergie.

**ISTRUZIONI PER L'USO**

1. Pretrattare adeguatamente le superfici del restauro.
2. Applicare uno strato sottile di Embrace First Coat sulle superfici metalliche e/o ceramiche pulite e asciutte, utilizzando un applicatore con punta floccata.
3. Polimerizzazione di 20 secondi.

**AVVERTENZA:**

- Embrace First Coat può causare irritazione agli occhi o alla pelle in caso di contatto.
- Indossare sempre guanti protettivi e occhiali quando si utilizza Embrace First Coat.
- In caso di contatto degli occhi con Embrace First Coat, sciacquare abbondantemente con acqua in un lavandino o utilizzando una stazione di lavaggio oculare di emergenza.

**CONSERVAZIONE E GESTIONE**

- Conservare nel contenitore originale ben sigillato a temperatura ambiente fresca. Evitare la luce diretta, temperature estreme, contaminazione e fonti di ignizione.

**SEGNALAZIONE DI INCIDENTI GRAVI**

Qualsiasi incidente grave che coinvolga il dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente, o altro organismo di regolamentazione appropriato. Le segnalazioni di incidenti gravi devono essere inviate a:

Pulpdent Corporation  
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

e-mail: pulpdent@pulpdent.com

Nota: Consultare la scheda di sicurezza per un elenco dei materiali presenti in questo prodotto.